


For perfect accentuation of  
unsintered zirconia

Zur perfekten Akzentuierung von  
ungesintertem Zirkonoxid

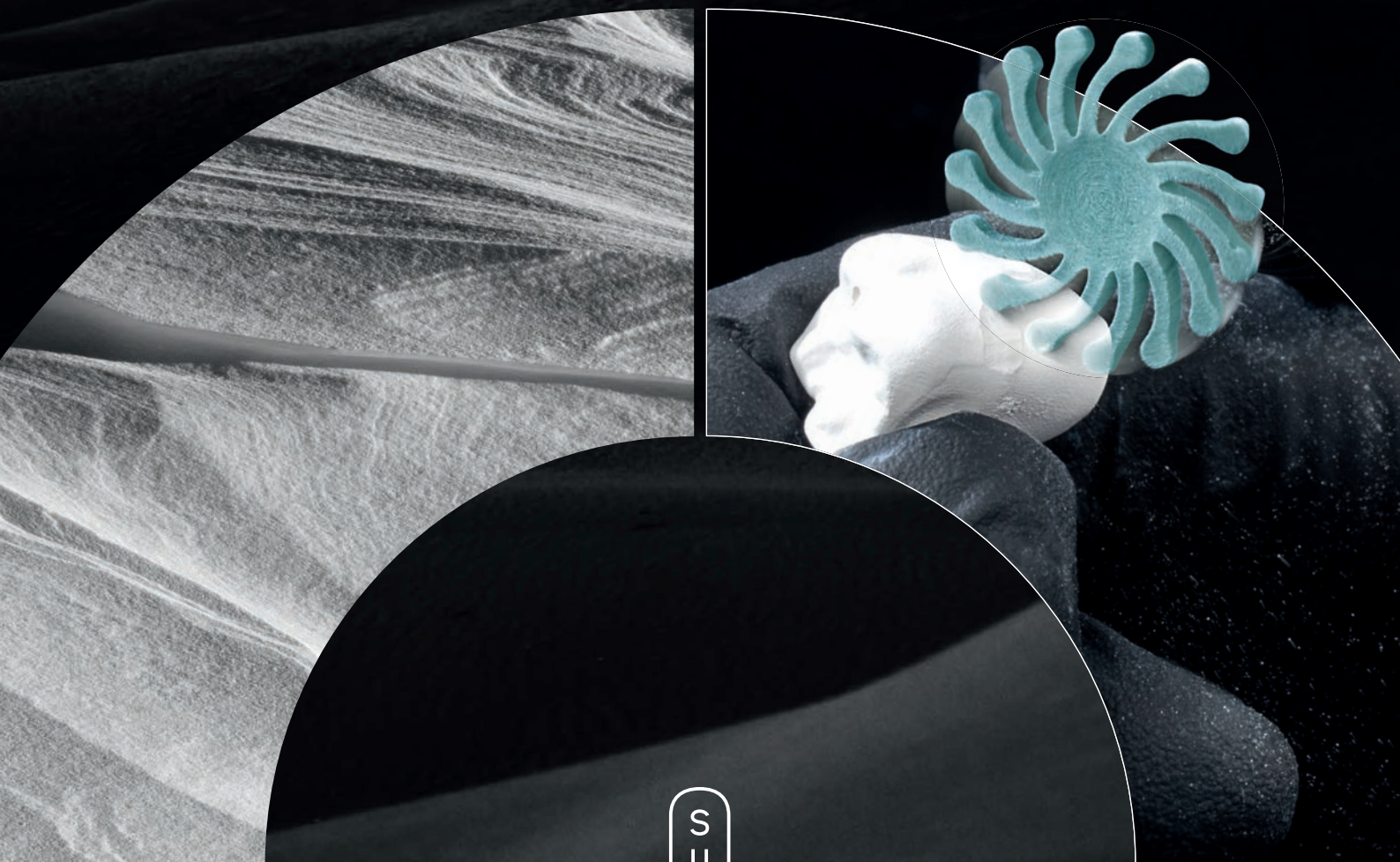

S  
U  
N

Exactly yours

# Panther Green

## Perfekte Grünlings-Akzentuierung.

---


*Perfect green-body accentuation.*

### Perfekte Akzentuierung für Zirkonoxid im vorgesinterten Zustand

Die Bearbeitung von Zirkonoxid im Grünlingszustand ist seit vielen Jahren ein festgelegter Bearbeitungsschritt in der erfolgreichen Verwendung des Werkstoffes. Hierbei ist größte Sorgfalt geboten, denn die CAD/CAM gefräste Struktur hat eine geringe Härte und ist bei unsachgemäßer Bearbeitung unwiederbringlich beschädigt. Verunreinigungen jeglicher Art wie Handfett, falsche rotierende Instrumente sowie Schmutz beeinflussen die Materialeigenschaften enorm. Mit den neuen Panther Green Instrumenten nutzen Sie speziell abgestimmte Instrumente, mit denen die Bearbeitung sicher, präzise und effizient jeden Tag verlässlich durchgeführt werden kann. So wie sie es von Panther Instrumenten gewohnt sind.

### *Perfect accentuation for pre-sintered zirconia*

*Contouring zirconia in the green-body state is an important step in perfecting the application of the material. This step requires meticulous care because the CAD/CAM-milled structures have a low hardness and can be irreparably damaged if not machined properly. Impurities of any kind, such as hand grease, improperly selected rotating instruments or general dirt, can have an enormous influence on the properties of the material. With the new Panther Green instruments, you are using specially matched instruments that you can rely on to perform safe, accurate and efficient machining every day. Just what you've come to expect from Panther instruments.*

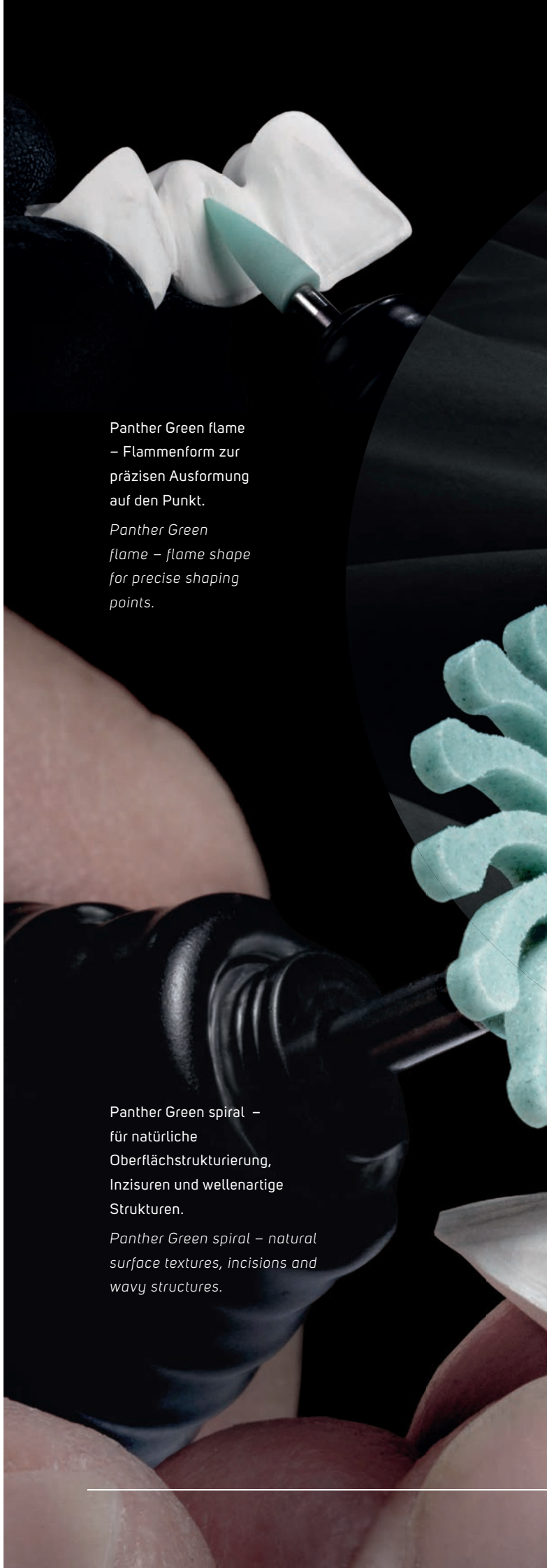

Panther Green flame  
– Flammenform zur  
präzisen Ausformung  
auf den Punkt.

*Panther Green  
flame – flame shape  
for precise shaping  
points.*

Panther Green spiral –  
für natürliche  
Oberflächenstrukturierung,  
Inzisuren und wellenartige  
Strukturen.

*Panther Green spiral – natural  
surface textures, incisures and  
wavy structures.*



Panther Green disc –  
zur schonenden  
Separierung von  
Interdentalbereichen.

*Panther Green disc –  
gentle separation of  
interdental areas.*





VORTEILE BENEFITS




**Kontrollierter Abtrag und exaktes Konturieren**  
*Controlled removal and accurate contouring*

**Optimale Rauigkeit für beste Zirkonoxidbrillanz**  
*Optimal roughness for maximum zirconia brilliance*

**Ready to use Technologie**  
*Ready-to-use technology*

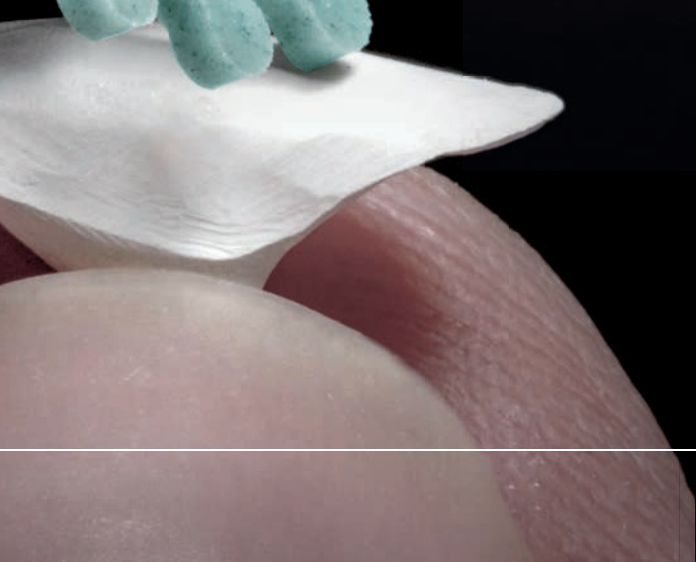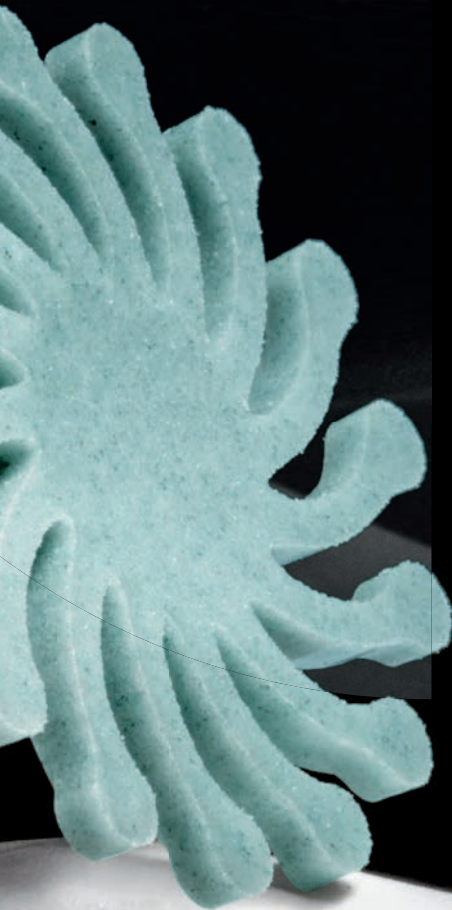



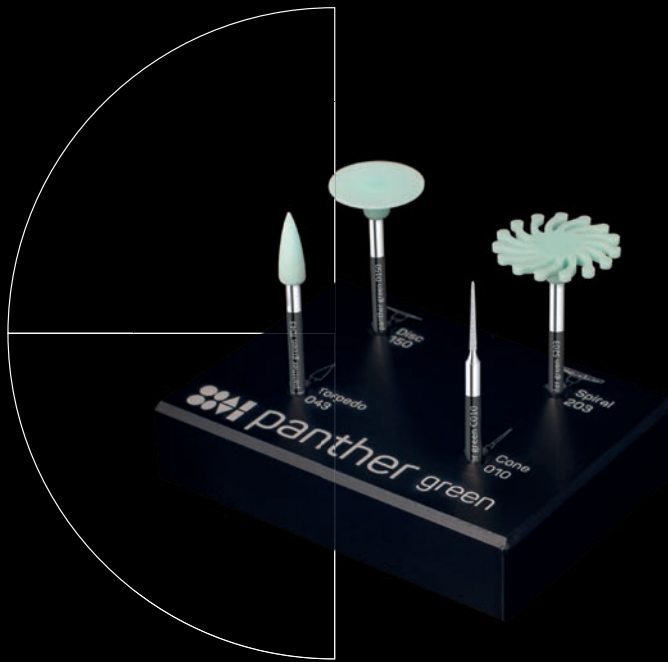

# Panther Green



PGS SET 104 / 01  
Panther Green Kit # 13

- 📏 Maße Sizes (mm)
- 🌀 Schaft Shank
- 🕒 optimal/maximal (1/min)
- 📦 Packungsgrößen Package sizes

Panther Green C010		Panther Green T043		Panther Green D150		Panther Green S203	
							
REF	PGS 600 104 M	REF	PGS 106 104 M	REF	PGS 146 104 M	REF	PGS 546 104 M
📏	∅ 1,1 × 11	📏	∅ 4,3 × 12	📏	∅ 15 × 0,3	📏	∅ 20,3 × 1,2
🌀	104-HP	🌀	104-HP	🌀	104-HP	🌀	104-HP
🕒	25.000/40.000	🕒	6.000/20.000	🕒	6.000/20.000	🕒	6.000/20.000
📦	1,3	📦	1,3	📦	1,3	📦	1,3



**DISTRIBUTED BY:**  
Zubler USA  
130 Satellite Blvd., Suite E  
Suwannee, GA 30026  
(770) 21-2131  
www.zublerusa.com  
sales@zublerusa.com

